

OPIS

NOVA SOVAN® AG SoftTouch je upijajuća nelepljiva obloga sa jonima srebra na podlozi od netkanog materijala (NW) sa tehnologijom lepka „SoftTouch“.

PREDVIĐENA UPOTREBA

- Koristi se kao obloga na mestu vaskularnog pristupa i zadržavanje eksudata po završetku dijalize intravenskih terapija ili transfuzija.
- Posebno pogodan za negu pacijenata kojima je potrebno često previjanje mesta uboda i koji su podložni povredama kože usled upotrebe medicinskog lepka. Optimalno rešenje za suhu ili perutavu kožu, što je karakteristično za pacijente na dijalizi ili onkološkim tretmanima.

NAMENA

Obloga pruža kompletno zaštitno delovanje.

Film koji oslobađa jone srebra:

- garantuje trenutnu i dugotrajnu antibakterijsku efikasnost do 7 dana, i pomaže smanjenje rizika od infekcija;
- smanjuje znake upale povezane sa ponovljenom venepunkcijom arteriovenske fistule (FAV);
- sprečava nastanak eshara, čineći naknadne ubode u vene manje traumatičnim za pacijenta;
- podstiče regeneraciju kože.

Podloga sa “SoftTouch” adhezivnom tehnologijom

- štiti kožu od mehaničkih oštećenja izazvanih kontinuiranim uklanjanjem flastera (kao rezultat ponovljenih tretmana), deluje terapijski i preventivno na povrede kože;
- sprečava pojavu crvenila i iritacije usled produžene primene flastera;
- optimalno rešenje za pacijente koji su skloni suvoj ili perutavoj koži, što je karakteristično za pacijente na dijalizi ili onkološkim tretmanima.


Delikatnost SoftTouch lepka se

kombinuje sa antibakterijskim i preventivnim dejstvom srebra.

Idealan za hronične pacijente ili za pacijente sa osetljivom kožom




Tradicionalni lepak ili SoftTouch?

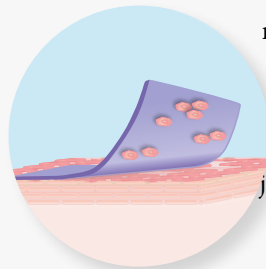

Tradicionalni lepkovi se ne lepe ravnomerno na kožu već ostavljaju džepove na površini koji se naknadno popunjavaju.

Koža je zategnuta, što čini fiksiranje jačim i pogodnim za tretmane koji se ne ponavljaju.

Kod **SoftTouch lepka**, prijanjanje na kožu je ravnomerno, a koža nije preterano zategnuta. Uklanjanje je manje traumatično, što ovu vrstu lepka čini idealnim za ponovljene tretmane ili za nežnu i osetljivu kožu.

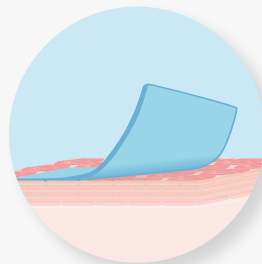

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Uklonite polovinu zaštitnog papira sa flastera i pričvrstite lepljivi deo za ruku pacijenta.
2. Stavite jastučić na ruku na mestu gde ste izvukli iglu.
3. Uklonite drugu polovinu zaštitnog papira i pričvrstite preostali deo flastera za kožu.

